


Let's get
started




如何使用 Normatec 3 氣壓式按摩系統

控制主機

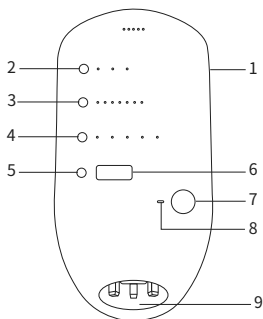


1. 電源鍵
2. 配件選擇鍵
3. 壓力等級鍵
4. ZoneBoost™區域增強鍵
5. 時間調整鍵
6. 顯示螢幕
7. 開始 / 停止鍵
8. 藍牙顯示燈
9. 充氣孔

連接軟管

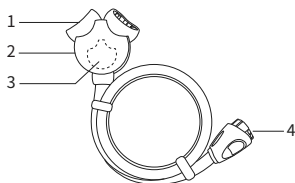

1. 匯接頭出氣口
2. 匯接頭
3. 阻塞墊片 (位於匯接頭下方, 如只使用單側配件時, 用於塞住單邊匯接頭出氣口)
4. 快扣連接器


腿部配件

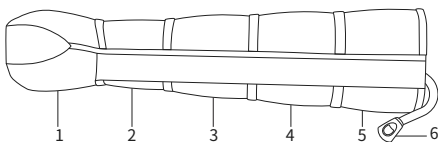

- 1 - 5. 分段壓力區
6. 連接器


使用前請詳細參閱操作說明。

手部配件

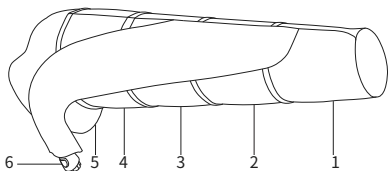


- 1 - 5. 分段壓力區
- 6. 連接器

腕部配件

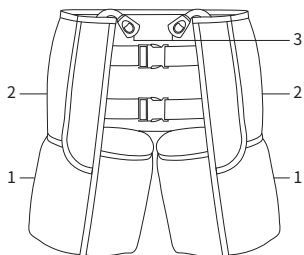

- 1 - 2. 分段壓力區
- 3. 連接器

充電器

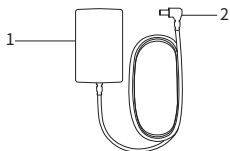

- 1. 壁面插頭
- 2. 電源連接器

在開始使用前請先

下載 Hyperice App


透過 Hyperice App，充分發揮 Normatec 3 的功能。跟隨引導式訓練、追蹤您的恢復進度，並從世界頂尖的專業運動員獲得技巧和建議。



充電您的設備

使用 Hyperice 原廠充電器，連接 Normatec 3 控制主機並插入插座進行充電。

在首次使用前，需要將電池充電長達 5 個小時。

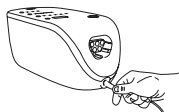

請使用 Hyperice 的原廠充電器充電，請勿使用來路不明的充電器以避免毀損產品或釀成火災。

使用時機


無論您是一位運動員還是僅僅想讓身體保持最佳狀態，Normatec 3 都能幫助您達到目標。Normatec 3 具有高科技按摩功能，可幫助您的肌肉熱身與恢復。

運動前通常持續使用 15 - 20 分鐘；運動後，按摩系統有助於您的恢復過程：通常持續使用 30 至 60 分鐘，也可以依照自己的身體狀況來設定系統的時間長短。

啟動您的 Normatec 3


連接軟管

將軟管連接到控制主機的充氣孔，將快扣連接器牢固地插入，直到聽到「咔嗒」聲為止。

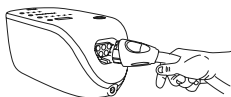

打開電源

按下控制主機側面的電源鍵，開啟控制主機的電源，LED 燈將亮起。

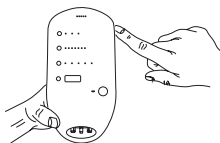


穿置配件

配件可以穿套在任何衣物上，請確保您的口袋是空的，沒有任何異物，避免在使用過程中感到不舒服。穿上腿部、臀部或臍部配件，找到一個舒適的姿勢坐著、斜躺或躺下。

如果配件有拉鍊，請確保完全拉上拉鍊，絕不要嘗試在拉鍊未完全拉上的情況下使用按摩系統。

連接配件


將配件連接到軟管上，將它們的快扣連接器牢固插入，直到聽到「咔嗒」聲為止。

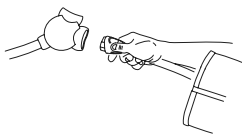

設定您的使用時間

調整壓力等級和使用時間，然後按下開始 / 停止鍵開始使用。

在使用過程中，您可以使用 ZoneBoost™ 功能增加單個區域的強度，ZoneBoost™ 設計在於特定區域的補強時使用，ZoneBoost™ 將在選擇的區域中增加額外的 60 秒按摩時間，以及 10 mmHg 壓力的增加。有關調整設定的更多資訊，請參閱使用手冊。

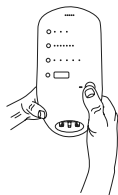

如何保養

清潔您的 Normatec 3

需用濕潤、乾淨的布擦拭配件的內部和外部，以及控制主機，也可以搭配酒精清潔，然後用乾燥、乾淨的布徹底擦乾。



存放您的 Normatec 3

確保控制主機已關機並且未連接充電器。

存放在乾淨、涼爽、乾燥的地方，避免陽光直射。

為您服務

如有任何操作上的疑問可以聯絡我們，將會有客服專員為您服務，也感謝您對本產品的支持！



(04)2386-1799



customer@ursasports.com



Hyperice 台灣官網：

hyperice.com.tw



有熊運動官網：

ursasports.com



@pfm2316u



客服時間：9:00 - 17:30 (週一～週五)